


Інструкція із застосування медичного виробу

Щіточка ектоцервікальна тип Д

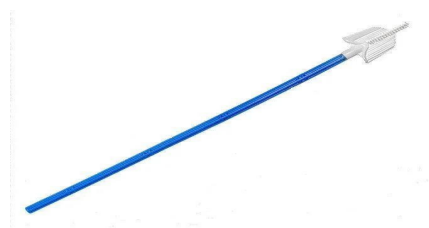

Вміст пакування: Щіточка ектоцервікальна тип Д стерильна, одноразового використання.

Призначення: застосовується в гінекологічній практиці для одномоментного забору матеріалу (середніх шарів епітелію) з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки (ектоцервіксу) та цервікального каналу (ендоцервіксу).

Характеристики: Щіточка ектоцервікальна тип Д складається з ручки (матеріал РР) і, власне, щітки (робочої голівки). Матеріал щітки - РЕ.

Довжина виробу – 20 см; ширина голівки 1,8-2,0 см; довжина робочої частини голівки 3,0 см.

Центральна частина щітки

виступає на 10 мм та має шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити щіточку ектоцервікальну тип Д з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Забезпечити доступ до шийки матки за допомогою дзеркала гінекологічного JS.
4. Для якісного забору матеріалу глибоко ввести в цервікальний канал центральну (виступаючу) частину робочої зони Щітки ектоцервікальної тип Д таким чином, щоб бокові ворсинки були щільно притиснуті до шийки матки.
5. Зробити декілька повних обертів щіточкою в обох напрямках, завдяки чому буде можливим взяти матеріал для дослідження.
6. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло лінійним рухом уздовж скла таким чином, щоб на склі з'явилися 3 «доріжки» зі зразками клітин: центральна – з цервікального каналу (ендоцервікс), 2 бокові – з шийки матки (ектоцервікс). Або перенести матеріал в маркований даними пацієнта контейнер з рідким консервантом, який направляється у лабораторію для досліджень.
7. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метерієлс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

